

SISTEMA DE IMPLANTES LOCATOR

ZD ZEST DENTAL
SOLUTIONS[™]

Ahorre hasta un 50%
en el coste en
Sobredentaduras
sobre Implantes con los
nuevos Implantes Zest



[▶ Ver Catálogo](#)



LOCATOR®

OVERDENTURE IMPLANT SYSTEM

PRÁCTICO
PACKAGE
TODO-EN-UNO

1 Implante
1 LOCATOR® Abutment
1 Pack de Procesado


El sistema de dos elementos, con el Abutment extraíble y alturas de 2,5, 3, 4, 5 y 6 mm., flexibiliza la elección según la altura del tejido, y permite el intercambio en caso de desgaste con el tiempo.



Kit Quirúrgico Fácil de identificar

Los Kits Quirúrgicos LOCATOR Implant, ofrecen un diseño simplificado, con un oportuno Protocolo de Fresado codificado por colores que facilitan su uso. Los topes para fresas son muy prácticos y fáciles de usar.

FRESAS CODIFICADAS POR COLORES

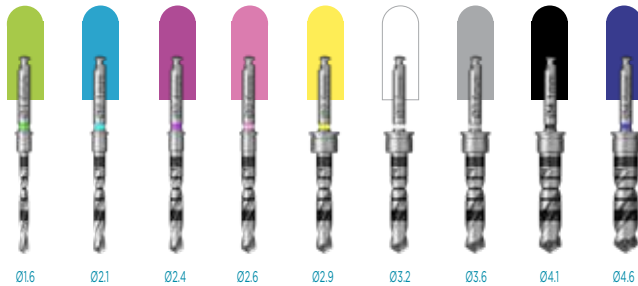

PROTOCOLO DE FRESADO

DIÁMETERO IMPLANTE	BLANDO	DURO
Ø2.4mm		
Ø2.9mm		
Ø3.5mm		
Ø3.9mm		
Ø4.4mm		
Ø4.9mm		

Círculo entero
Fresar la longitud total del implante

Medio círculo
Fresar 4mm, menos que la longitud del implante

LAS VENTAJAS DE LOS IMPLANTES LOCATOR



- RBM**
Tratamiento superficial con alto nivel de contacto entre el implante y el hueso para favorecer la osteointegración.
- Conexión única**
Plataforma protésica única de 2.9 mm. para todos los tamaños de implantes que permite un cambio de plataforma para diseños de cresta standard.
- Diámetro reducido**
El diámetro reducido del cuello, está diseñado para disminuir el estrés en el hueso crestal.
- Núcleo cónico**
Condensación ósea gradual para una segura funcionalidad.
- Corte apical**
Facilita la inserción y la estabilidad durante la colocación.
- Diseño específico**
Diseño basado en el diámetro del implante para facilitar la colocación.
- Espiras progresivas**
El diseño de rosca progresiva que se ensancha en la parte coronal, favorece la estabilidad primaria, la condensación ósea y la velocidad de inserción.

Consulte nuestras Ofertas y planifique los casos de Removibles sobre Implantes con un Sistema Premium que combina los elementos necesarios con un coste muy razonable.

Si ya utiliza los Implantes LODI de 2.4, 2.9 ó 3.4, únicamente necesitará 2 o 3 fresas adicionales según los casos. El Cortical drill y los Topes de fresas opcionalmente.

Consulte en su caso, las Ofertas que le permitirán recibir el nuevo Surgical Kit por una compra de Implantes LOCATOR.

Ver en YouTube:

The Newly Expanded LOCATOR Overdenture Implant System (<https://youtu.be/iklbnhbdBA>)

Mandibular Guided Surgery Demonstration (<https://youtu.be/RskPsram5RO>)

Basic Mandibular Overdenture Surgery and Prosthetics (<https://youtu.be/eORrQwe5V3M>)

Ancladén

ZD ZEST DENTAL SOLUTIONS™

ZEST | DANVILLE MATERIALS | PERIOSCOPY

93 417 29 84 | ancladen@ancladen.com | www.ancladen.com